


## PALM-CENTRO-INSTALLATION

Um den Centro für Zwecke des Sprengelprogrammes möglichst rasch und unkompliziert einsatzfähig zu machen, nehmen Sie bitte zuerst das Anleitungsheft „**Bitte zuerst lesen**“ zur Hand und verschaffen Sie sich im deutschen Teil ( Seiten 15 - 19) einen groben Überblick, ohne zunächst mit dem Gerät selbst zu arbeiten.


**Bei allen Manipulationen gehen Sie vorsichtig mit dem Gerät um und wenden Sie keine Kraft an, mit dem richtigen „Dreh“ geht alles ganz leicht!**

**Dann gehen Sie bitte exakt nach dieser Anleitung vor!**


Bereiten Sie die SIM-Karte für den Centro vor und setzen Sie sie wie folgt ein.:

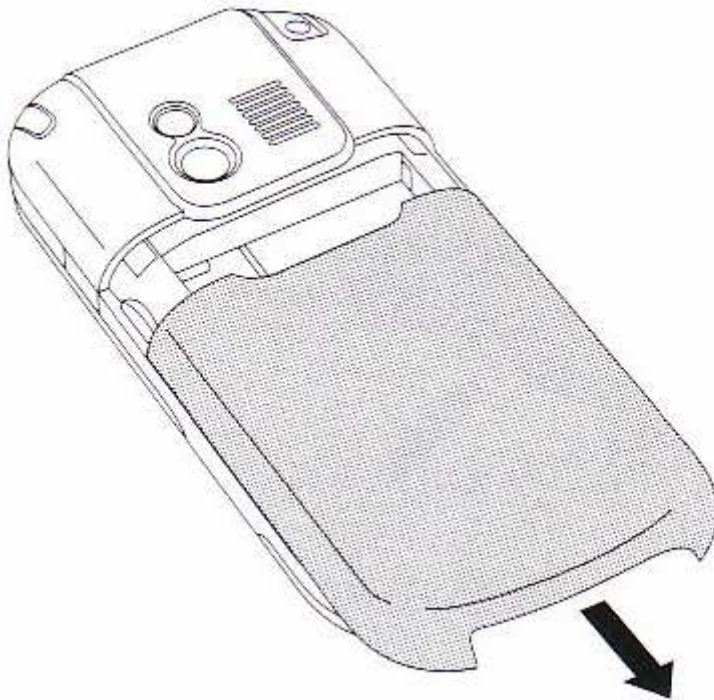

Halten Sie das Gerät mit der Vorderseite nach unten und entfernen Sie die Batteriefachabdeckung, indem Sie mit beiden Daumen darauf drücken. Ziehen Sie die Abdeckung dann ein kleines Stück zurück, bis Sie sie problemlos abheben können.

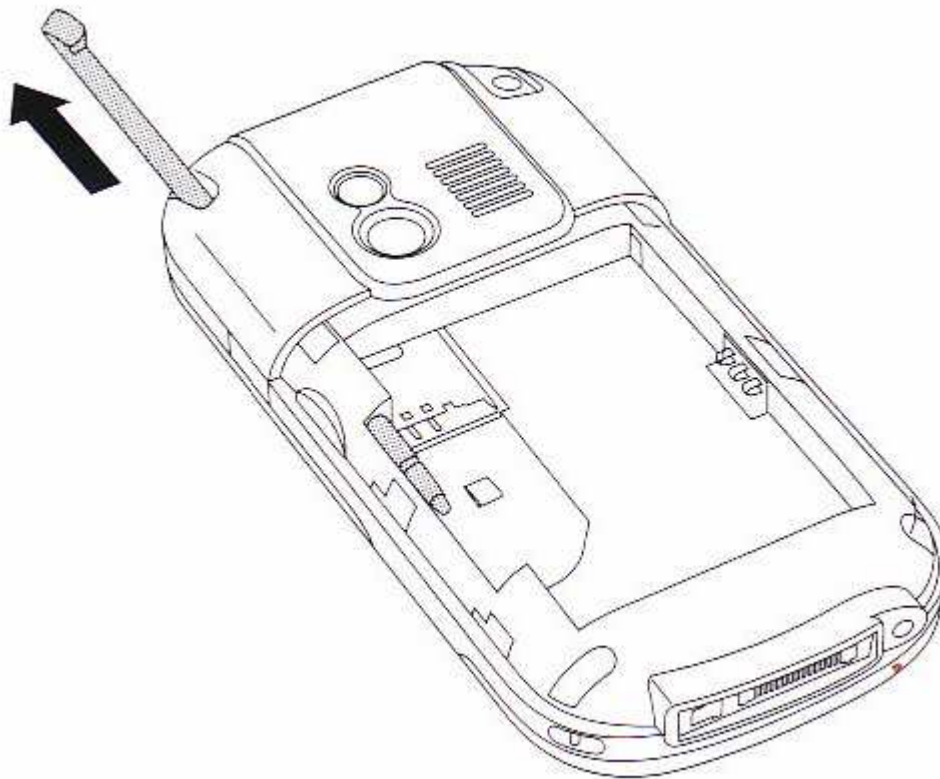


Entfernen Sie den Stift, um das Einsetzen der SIM-Karte zu erleichtern.

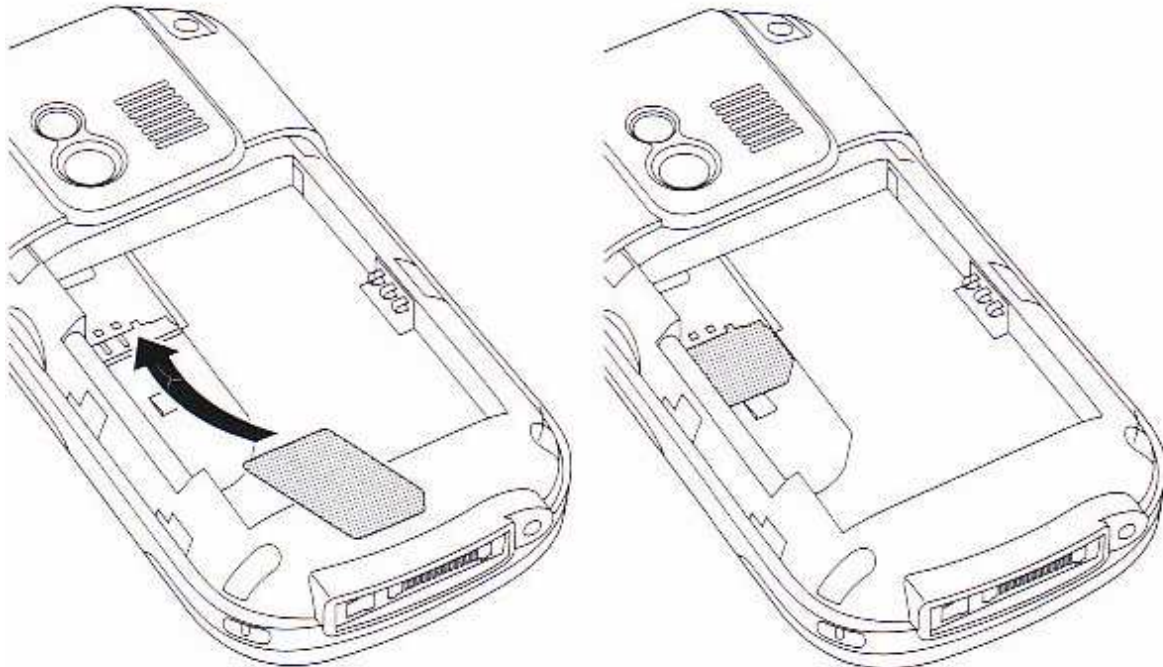

Legen Sie die SIM-Karte so in den SIM-Einschub ein, dass die eingekerbte Seite nach unten rechts zeigt.  
Setzen Sie dann den Stift wieder ein.

- 1 Legen Sie den Akku so in das Fach ein, dass die Aufschrift *palm* nach oben zeigt.

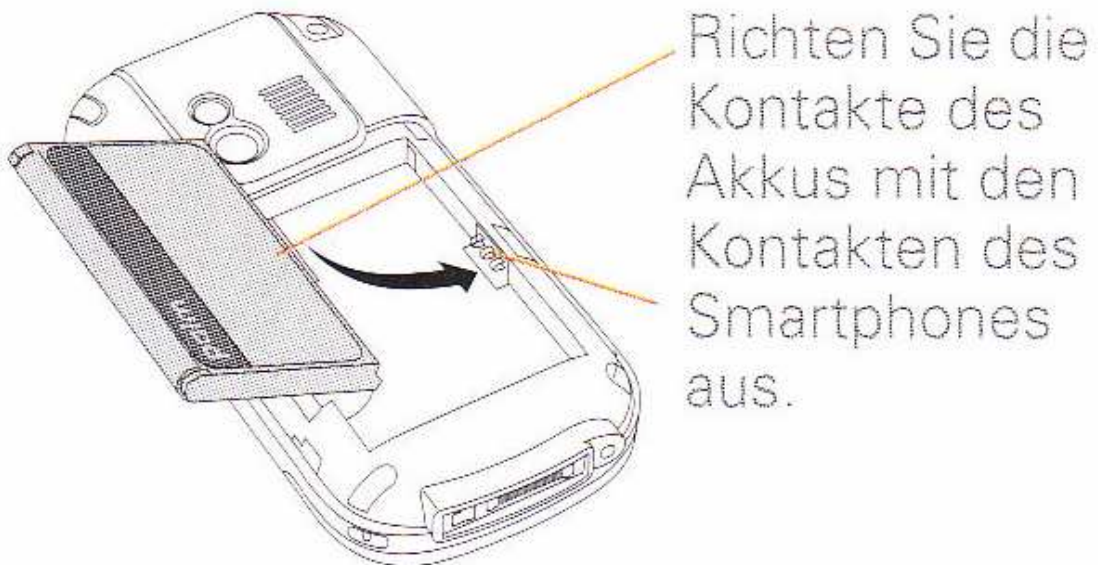

Legen Sie die Batteriefachabdeckung an der Stelle, an der Sie sie zuvor abgehoben haben, wieder auf. Achten Sie darauf, dass die Warzen an der Innenseite des Deckels und die Einkerbungen im Gehäuse zusammenpassen und der Deckel satt am Gehäuserand aufliegt. Dann schieben Sie den Deckel - indem Sie vorsichtig mit mehreren Fingern draufdrücken – wieder auf, bis er einrastet.



Da der Akku noch leer ist, schaltet sich das Gerät noch nicht ein.

Bereiten Sie nun das Ladegerät für die in Österreich verwendeten Steckdosen vor. Verwenden Sie dazu den passenden Adapter und beachten Sie dabei, dass die Stahlstifte nach oben gerichtet sein müssen, damit Sie den Adapter aufstecken und einrasten lassen können (keine Gewalt!).

Stecken Sie das Ladekabel an der dafür vorgesehenen Buchse rechts unten an der Vorderseite des Centro so an, dass der weiße Pfeil am Ladekabel für Sie sichtbar ist. Nach einigen Minuten wird das Gerät „aufwachen“ und den auf der folgenden Seite dargestellten Bildschirminhalt zeigen, unternehmen Sie aber nichts, sondern lassen Sie das Gerät mehrere Stunden (ca. 8) Stunden lang am Ladekabel hängen.

Dann ist das Setup an der Reihe, mit dem Sie einige Grundeinstellungen, insbesondere die deutsche Betriebsanzeige, vornehmen müssen.



Drücken Sie auf den unteren Teil des Navigationsringes oder der sog. Mittetaste (knapp oberhalb der Tastatur), damit die Sprache **Deutsch** markiert (blau hinterlegt) wird. Bestätigen Sie dann mit der Mittetaste die Sprachauswahl. Sie werden noch einmal gefragt, ob Sie die ausgewählte Sprache wirklich einstellen wollen. Da der Touchscreen noch nicht reagieren kann, müssen Sie ja oder nein mit der linken oder rechten Seite des Navigationsringes wählen. Wenn die richtige Antwort blau eingerahmt ist, bestätigen Sie mit der Mittetaste die Auswahl.

Als nächstes erfolgt die Kalibrierung des Touchscreens (Zielscheiben!), die Sie ja schon vom Z 22 her kennen. Verwenden Sie dazu den im Gerät versteuten Stift.

Folglich stellen Sie Standort, Datum und Uhrzeit ein. Verwenden Sie bei automatische Einstellungen den Wert „Nichts“, Berlin ist als Standort ok, Datum und Zeit müssen Sie selber angeben. Dann ist das Grundsetup abgeschlossen.

**Die Installation der Palm-Desktop-Software braucht nur einmal und nur am PC zu erfolgen, an dem die Sprengelsynchronisation durchgeführt wird!**

Verwenden Sie dazu die mitgelieferte CD. Mit der CD können Sie problemlos die alte Software auf den neuesten Stand bringen (aktualisieren). Wenn dann die Frage nach dem Installationstyp auftaucht, wählen Sie „Vollständig“.

Bei der Frage, mit welchem Programm der Hotsync-Manager zusammenarbeiten sollen, wählen Sie Palm-Desktop.

Mit der neuen Software können auch die alten Z22 weiter synchronisiert werden.

Nach Abschluss des Installationsvorganges stecken Sie den Centro mit dem neuen USB-Kabel an und starten Sie den Rechner mitsamt dem angehängten Centro neu.

Versuchen Sie nun einen Hotsync-Vorgang mit dem Knopf am Synchronisationskabel durchzuführen.

Legen Sie für jeden Centro bei der Synchronisation ein eigenes Benutzerkonto an und verwenden Sie kein bestehendes, etwa jenes, das für den Z22 des Mitarbeiters vorher verwendet wurde. Um Missverständnisse zu vermeiden, lassen Sie (nur ein Vorschlag!) den Gerätenamen mit C\_ (für Centro) beginnen (z.B: C\_Maria)

Wenn Sie alle neuen Centros einmal am System angemeldet haben, starten Sie das Sprengelprogramm am PC und rufen Sie den Menüpunkt „Diverses – Update für Palmprogramm ..herunterladen“ auf. Sie werden sehen, dass die neuen Centros nun alle in das System integriert sind (die Gerätenamen sind aufgelistet, das Häkchen ist gesetzt).

Jetzt führen Sie einen weiteren Synchronisationsvorgang durch und starten das Erfassungsprogramm an Centro mit dem entsprechenden Icon. Versuchen Sie sich im Erfassungsprogramm anzumelden, damit die Datenbank erzeugt werden kann. Führen Sie noch einmal eine Synchronisation durch. Wenn Sie anschließend neuerlich das Erfassungsprogramm starten, sollten Sie alle Daten vorfinden und sich problemlos anmelden können.

Sollte der Synchronisationsvorgang hernach nicht ordnungsgemäß starten, insbesondere das Superwaba-Fenster (blau) nicht öffnen, schreiben Sie bitte ein Ticket, wir werden dann die restlichen Einstellungen per Fernwartung vornehmen.

[Sollten Sie professionelle Hilfe an der Hand haben, hier die Anleitung:  
Wechseln Sie mit Ausführen – cmd in die Kommandozeile.  
Wechseln Sie in das Verzeichnis Superwaba cd\superwaba und geben Sie den Befehl ein: regconduit.bat – damit wird der modifizierte Sprengelconduit gestartet]

Nun sollten Sie das **Sprengelprogramm noch auf eine Favoritentaste legen**, am besten auf die Taste **P** (rechts außen auf der Tastatur)

Wechseln Sie dazu auf die Anwendung Telefon (Telefonsymbol links neben der Mittetaste). Dann drücken Sie mit dem Stift auf das Sternsymbol unten und alle Favoriten werden angezeigt. Betätigen Sie nun die Menütaste ganz unten rechts auf der Tastatur und wählen Sie aus dem sich öffnenden Menü aus: Aufnahme – neuen Favoriten. Im nun folgenden Fenster geben Sie oben unter Typ an: Anwendung und suchen Sie unter Bez.: das Programm sprengel aus der Liste und geben Sie neben Schnellaste mit der Taste P auf der Tastatur P ein. Somit können Sie aus jeder Anwendung, in der sich der Centro befindet durch ein längeres Drücken der Taste P in das Sprengelprogramm wechseln.

Auf die wesentlichen Fragen für die vielen Möglichkeiten, die das Gerät sonst noch bietet, geben die dem Gerät beigelegten Referenzen Auskunft. Sollten Sie Fragen haben, die von den Anleitungen nicht beantwortet werden, scheuen Sie sich nicht, ein **Ticket** zu schreiben.

Wir werden auf der Homepage einen Bereich Centro – FAQ einrichten, in dem die wesentlichen Fragen zusammengefasst beantwortet werden. Damit können alle Sprengel auf diesen Informationspool zugreifen.

#### Noch ein Hinweis zur **Ladung der Akkus:**

Smartphones haben aufgrund ihrer vielseitigen Anwendbarkeit auch einen höheren Stromverbrauch. Der Ladezyklus hängt von der Intensität der Verwendung des Gerätes ab. Jedenfalls sollte der Akku nicht permanent in vollem Ladezustand gehalten werden und erst wieder aufgeladen werden, wenn er annähernd leer ist. Es ist für den Akku schädlich, wenn er tagelang an der Ladestation hängt und nicht benützt wird.

Ein häufiger Wechsel zwischen guter Entladung und Aufladung ist für den Akku am besten.

Wir sind im Begriffe, die Palm-Software so auszubauen, dass in absehbarer Zeit im Bedarfsfall die Daten auch über Telefon abgeglichen werden können. d.h. nicht jeder Synchronisationsvorgang ist an eine Anwesenheit im Büro gebunden.

Viel Freude mit Ihrem neuen Gerät!

Mit freundlichen Grüßen  
Dr. Hans Ebenbichler